


Dispositivos manuales de etiquetado

El sistema de documentación de **gke Steri-Record®** se usa para la trazabilidad de lotes y pacientes después de la esterilización de dispositivos médicos.

Usando la etiquetadora de **gke** se imprime la etiqueta con la fecha de producción y caducidad, número de lote y persona responsable y se adhiere a cada paquete y a la hoja de documentación. Después de abrirse el paquete estéril en la sala de operaciones la etiqueta puede despegarse del paquete y adherirse a la hoja del paciente. Por lo tanto, toda la información proporcionada en cada paquete puede ser rastreada desde el paciente hasta el procesamiento y aprobación de este.

Las etiquetas están disponibles en diferentes colores, y opcionalmente con o sin indicador.

gke ofrece 2 versiones de etiquetadoras:

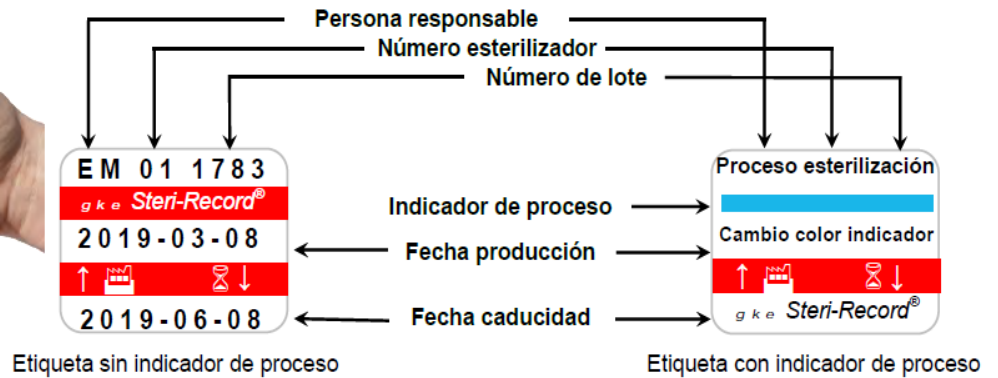

Art.-Nº.	Código Producto	1ª. línea de impresión	2ª. + 3ª. línea de impresión
240-820	D-G-NL	3 dígitos alfa-numéricos y 9 dígitos numéricos	12 dígitos numéricos
240-830	D-G-AL	12 dígitos alfa-numéricos	
240-892	Rollo de tinta	Para todas las etiquetadoras manuales de gke	