


## STERIKING® Revestimientos de bandeja con borde

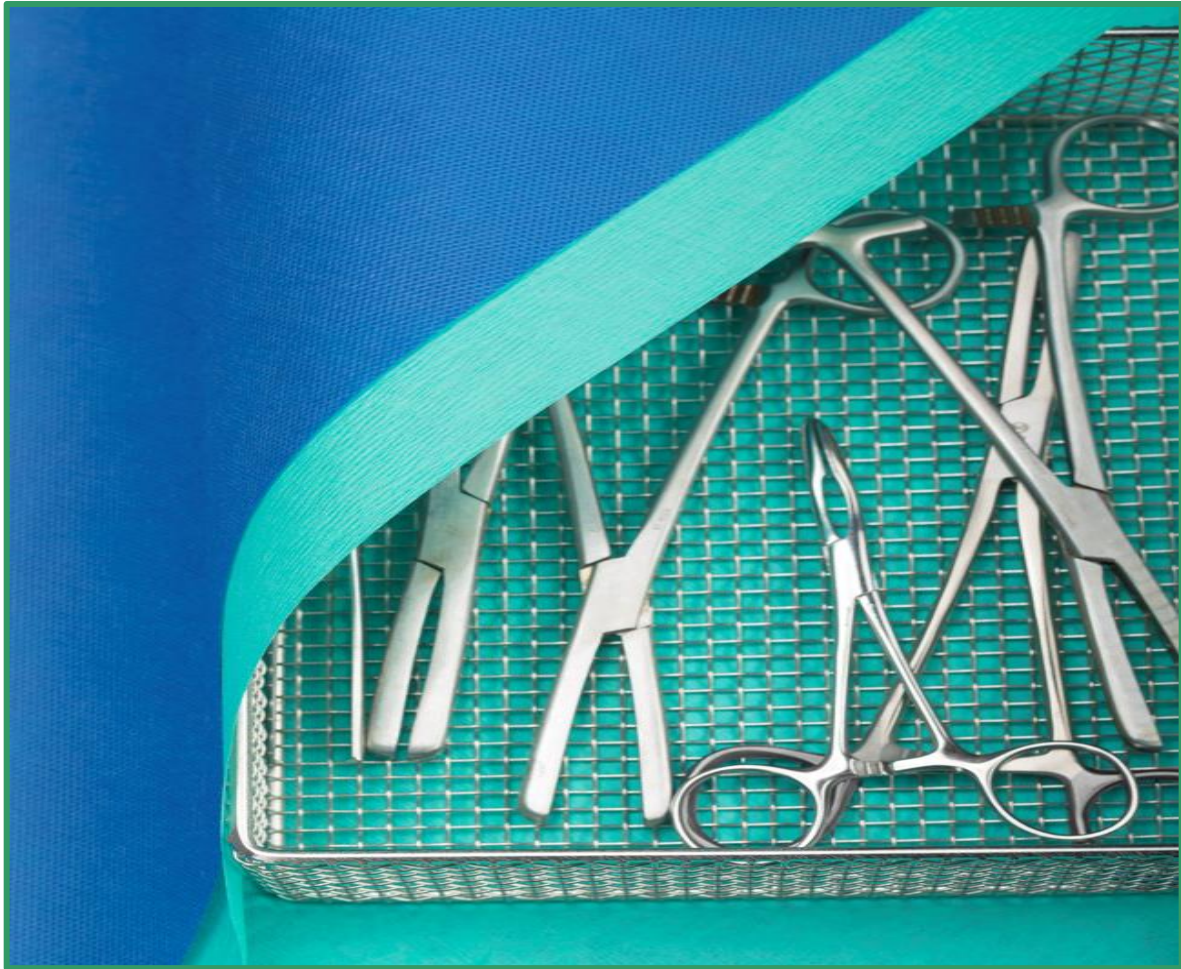

Los revestimientos de bandejas STERIKING® son papeles médicos especialmente desarrollados para absorber la humedad excesiva en bandejas de instrumentos quirúrgicos y para protecciones mecánicas de bandejas de instrumentos o cestas de esterilización que dañan la envoltura durante la esterilización. Son para un solo uso.

### Características de rendimiento

Los revestimientos STERIKING® Tray con hojas de bordes precortados se fabrican a partir de papel médico blanqueado con oxígeno. El suministro del papel es pulpa de madera química, libre de suciedad y olor desagradable cuando está seco o mojado. Las láminas STERIKING® Tray Liner son blancas y no dejan pelusa ni fibra durante el uso normal. No causan ninguna corrosión de los instrumentos.

STERIKING® es una marca registrada de Wipak Medical.

### Datos técnicos

Propiedades	Unidades	Normas o métodos	Valor típico
Peso base	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	107
Resistencia a la tracción MD	N/15 mm	EN ISO 1924-2	50

CD de resistencia a la tracción	N/15 mm	EN ISO 1924-2	15
Resistencia a la tracción húmeda MD	N/15 mm	ISO 3781	15
CD de resistencia a la tracción húmeda	N/15 mm	ISO 3781	10
Alargamiento MD	%	EN ISO 1924-2	8
CD de elongación	%	EN ISO 1924-2	3
Klemm capilar escalada MD	mm	ISO 8787	80
Valor de pH		ISO 6588	7
Espesor	mm	ISO 534	0,35
Color			Blanco

### Recomendaciones de almacenamiento y vida útil

No es necesario tomar precauciones especiales con respecto al almacenamiento o transporte de los revestimientos de bandejas STERIKING®. Sin embargo, no deben exponerse a una humedad muy alta ni a la luz solar directa.

La vida útil está relacionada con eventos y no con el tiempo. Si se almacena de acuerdo con las instrucciones, la vida útil de las envolturas no tejidas STERIKING® es de al menos 5 años a partir de la fecha de fabricación.

### Restrictions in Use

Los no tejidos STERIKING® no son adecuados para la esterilización por aire caliente y seco o gas plasma.

### Embalaje de ventas y transporte

Los revestimientos de bandejas STERIKING® se envasan en una doble envoltura de polietileno reciclable. Número de lote, producción y consumo preferente: fechas indicadas en el embalaje de transporte.

### En caso de queja

En caso de cualquier queja, el número de lote y el código de identificación deben ser proporcionados por el reclamante. Para la evaluación del producto reclamado, una muestra defectuosa (o una foto digital) y la descripción del defecto junto con una muestra no utilizada deben ponerse a disposición de Wipak.

STERIKING® es una marca registrada de Wipak Medical.

### Revestimientos de bandejas con borde Steriking® c

Código	Tamaño sin borde	Tamaño con borde	Unidad de embalaje
TLWE2525	25 x 25 cm	35 x 35 cm	500 hojas
TLWE4825	48 x 25 cm	58 x 35 cm	500 hojas
TLWE5030	50 x 30 cm	60 x 40 cm	500 hojas

*Esta especificación se refiere al grupo de productos nombrado y será válida hasta la próxima revisión. Otros documentos relacionados con el producto pueden estar disponibles bajo petición. La información contenida aquí es, a nuestro entender, precisa y confiable a partir de la fecha de la publicación. Wipak no ofrece ninguna garantía y no hace ninguna representación en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento, y no asume ninguna responsabilidad con respecto a las consecuencias de su uso o por cualquier error de impresión. Es responsabilidad del cliente inspeccionar y probar nuestros productos para asegurarse de la idoneidad de los productos para el propósito particular del cliente y la idoneidad a las circunstancias reales a las que está expuesto el producto. El cliente también es responsable del uso, procesamiento y manejo apropiado, seguro y legal de nuestros productos, especialmente cuando se dan recomendaciones para un uso y almacenamiento seguros. Nada en este documento constituirá ninguna garantía, ni se inferirá una protección contra ninguna ley o patente.*

